




VISTA APEX

 **SUPERB**
UNIVERSAL ADHESIVE

REF **SDL17, SDL18**

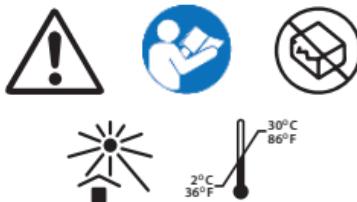

Rx Only



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Inter-Med, Inc.

2200 South St.
Racine, WI 53404, USA
Tel: +1-262-636-9755
www.vistaapex.com




90384-I-AP-MUL (2)



Catalogue Number

EN	Catalogue number
FR	Référence catalogue
DE	Bestellnummer
IT	Numero di catalogo
ES	Número de catálogo

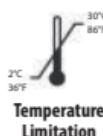

EN	Temperature limitation
FR	Limite de température
DE	Temperaturbegrenzung
IT	Limiti temperatura
ES	Límites de temperatura



**Caution,
Consult
Accompanying
Documents**

EN	Caution, consult accompanying documents
FR	Attention, consulter les documents joints
DE	Vorsicht, Begleitdokumente beachten
IT	Attenzione, consultare la documentazione allegata
ES	Precavión: consulte documentos adjuntos

EC REP

Authorized Representative in the European Community

EN	Authorized Representative in the European Community
FR	Représentant agréé pour la Communauté européenne
DE	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft
IT	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
ES	Representante autorizado en la Comunidad Europea



**Follow
Instructions
For Use**

EN	Follow instructions for use
FR	Suivez les instructions d'utilisation
DE	Gebrauchsanweisung befolgen
IT	Attenersi alle istruzioni per l'uso
ES	Siga las instrucciones de uso



Manufacturer

EN	Manufacturer
FR	Fabricant
DE	Hersteller
IT	Produttore
ES	Fabricante



**Do not use
if package is
damaged**

EN	Do not use if package is damaged
FR	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
DE	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
IT	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
ES	No utilice el producto si el envoltorio está dañado

Rx Only

EN	CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
FR	ATTENTION: la loi fédérale américaine stipule que la vente de ce dispositif est réservée aux médecins ou sur prescription médicale.
DE	VORSICHT: US-Bundesgesetz beschränkt den Verkauf dieses Produkts an einen Arzt oder auf dessen Anordnung.
IT	ATTENZIONE: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a medici o su prescrizione medica.
ES	PRECAUCIÓN: las leyes federales de los Estados Unidos solo permiten la venta de este dispositivo por parte un médico o por prescripción facultativa.



**Keep Away
From
Sunlight**

EN	Keep away from sunlight.
FR	Tenir à l'écart de la lumière du soleil.
DE	Von Sonnenlicht fernhalten.
IT	Tenere lontano dalla luce solare.
ES	Mantener alejado de la luz solar.

EN**Description:**

SUPERB Universal Adhesive is a single bottle bonding system for use in ALL dental restorations. SUPERB Universal Adhesive combines the etchant, primer and bonding resin into a single component. Through the elimination of components and steps within the application protocol, SUPERB Universal Adhesive is extremely easy to apply and has little to no technique sensitivity. SUPERB Universal Adhesive provides: easy application, consistent results, best in class bonding and the elimination of post operative sensitivity in a single bottle. SUPERB Universal Adhesive can be used in 3 modes: Self Etch, Selective Etch or Total Etch. All 3 techniques will provide exceptional results.

Indications for Use:

- Direct Restorations: to seal enamel / dentin prior to restoring with light-cure or self-cure composite material
- Indirect Restorations: bonding light-cured, self-cured or dual-cured composite cements or glass ionomer or resin-modified glass ionomer cements
- Bonding CEREC® restorations
- Desensitization: to treat hypersensitive and/or exposed root surfaces
- Desensitizing crown preparations
- Sealing preparations before placing amalgams
- Bonding crowns and bridges
- Bonding in posts and cores
- Bonding veneers

General Instructions^{1,2,3,4}:**MODE: SELF ETCH**

1. Rinse the preparation thoroughly and remove any pooled water. Leave tooth moist
2. Dispense a drop of SUPERB Universal Adhesive into the cavity of the enclosed mixing well. Using a bristle brush applicator, apply 1 coat of SUPERB Universal Adhesive to

the entire cavity preparation and the surrounding tooth structure, allow material to dwell for twenty seconds. DO NOT DRY.

3. Using the remaining material in the well and same applicator, apply 2 additional coats of SUPERB Universal Adhesive
4. Dry the surface thoroughly. Do not blast the surface with air or use suction as this could remove material from the surface and lead to debonds or post operative sensitivity.
5. Light-activate for ten seconds. SUPERB Universal Adhesive can be activated with any dental activation light.
6. Continue restorative procedure with material of choice. Follow manufacturer's instructions for all restorative materials.

MODE: SELECTIVE ETCH

Accidental etching of dentin will not negatively impact bond strengths.

1. Rinse the preparation thoroughly and remove all visible water by drying the surface for approximately 5 seconds with dried compressed air. Do not desiccate the tooth surface.
2. Apply Clean & Boost® (Gel or Liquid) to the enamel surfaces to be bonded. Agitate for ten seconds, rinse thoroughly and leave moist.
3. Dispense a drop of SUPERB Universal Adhesive into the cavity of the enclosed mixing well. Using a bristle brush applicator, apply 1 coat of SUPERB Universal Adhesive to the entire cavity preparation and the surrounding tooth structure, allow material to dwell for twenty seconds. DO NOT DRY.
4. Using the remaining material in the well and same applicator, apply 2 additional coats of SUPERB Universal Adhesive.

5. Dry the surface thoroughly. Do not blast the surface with air or use suction as this could remove material from the surface and lead to debonds or post operative sensitivity.
6. Light-activate for ten seconds. SUPERB Universal Adhesive can be activated with any dental activation light.
7. Continue restorative procedure with material of choice. Follow manufacturer's instructions for all restorative materials.

MODE: TOTAL ETCH

1. Rinse the preparation thoroughly and remove all visible water by drying the surface for approximately 5 seconds with dried compressed air. Do not desiccate the tooth surface.
2. Apply Clean & Boost® (Gel or Liquid) to the tooth surface to be bonded (both dentin and enamel). Agitate the material for 10 seconds , rinse thoroughly and leave moist.
3. Dispense a drop of SUPERB Universal Adhesive into the cavity of the enclosed mixing well. Using a bristle brush applicator, apply 1 coat of SUPERB Universal Adhesive to the entire cavity preparation and the surrounding tooth structure, allow material to dwell for twenty seconds. DO NOT DRY.
4. Using the remaining material in the well and same applicator, apply 2 additional coats of SUPERB Universal Adhesive.
5. Dry the surface thoroughly. Do not blast the surface with air or use suction as this could remove material from the surface and lead to debonds or post operative sensitivity.
6. Light-activate for ten seconds. SUPERB Universal Adhesive can be activated with any dental activation light.
7. Continue restorative procedure with material of choice. Follow manufacturer's instructions for all restorative materials.

Storage:

Protect from sunlight. Store between 2°C/36°F and 30°C/86°F. See individual component labels for specific expiration dates.

Cautions:

Avoid contact with eyes. If the material come into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention. Un-polymerized resins may cause skin sensitization in susceptible persons, in case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water.

Notes:

Visit vistaapex.com for SDS

¹ Although it is not critical to the success of SUPERB Universal Adhesive, it is recommended that the preparation be cleaned with Clean and Boost® (Gel or Liquid) prior to beginning the bonding protocol. Pumicing or gentle particle abrasion of enamel is also recommended.

² Deciduous teeth are treated in the same manner as permanent teeth.

³ Uncut enamel should be roughened or etched prior to bonding.

⁴ SUPERB Universal Adhesive is always light-activated before placing veneers and bonded crowns.

FR**Description:**

SUPERB Universal Adhesive est un système de collage à flacon unique à utiliser dans TOUTES les restaurations dentaires. L'adhésif universel SUPERB combine l'agent de gravure, l'apprêt et la résine de liaison en un seul composant. Grâce à l'élimination des composants et des étapes dans le protocole d'application, SUPERB Universal Adhesive est extrêmement facile à appliquer et a peu ou pas de sensibilité technique. L'adhésif universel SUPERB offre: une application facile, des résultats constants, le meilleur collage de sa catégorie et l'élimination de la sensibilité postopératoire, le tout en un seul flacon. SUPERB Universal Adhesive peut s'utiliser de 3 façons: Auto-gravure, gravure sélective ou gravure totale. Les 3 techniques donneront des résultats exceptionnels.

Mode d'emploi:

- Restaurations directes : pour sceller l'émail / la dentine avant la restauration avec un matériau composite photopolymérisable ou autopolymérisable
- Restaurations indirectes : collage de ciments composites photopolymérisables, autopolymérisables ou bipolymérisables ou de ciments verre ionomère ou verre ionomère modifié par résine
- Collage des restaurations CEREC®
- Désensibilisation : pour traiter les surfaces radiculaires hypersensibles et/ou exposées
- Préparations de couronnes désensibilisantes
- Préparations de scellement avant la mise en place des amalgames
- Collage de couronnes et bridges
- Collage dans les tenons et noyaux
- Facettes collantes

Instructions générales^{1,2,3,4}:**MODE: AUTO GRAVURE**

1. Rincez abondamment la préparation et éliminez l'eau accumulée.
Laissez la dent humide
2. Déposez une goutte d'adhésif universel SUPERB dans la cavité du puits de mélange fermé. À l'aide d'un applicateur à brosse à poils, appliquez 1 couche d'adhésif universel SUPERB sur toute la préparation de la cavité et la structure dentaire environnante, laissez le matériau agir pendant vingt secondes. NE PAS SÉCHER.
3. À l'aide du matériau restant dans le puits de l'applicateur, appliquez 2 couches supplémentaires de SUPERB Universal Adhesive
4. Séchez soigneusement la surface. Ne soufflez pas la surface avec de l'air ou n'utilisez pas d'aspiration car cela pourrait enlever du matériau et entraîner des décollements, voire une sensibilité postopératoire.
5. Activez la lumière pendant dix secondes. L'adhésif universel SUPERB peut être désactivé avec n'importe quelle lumière d'activation dentaire.
6. Continuez la procédure de restauration avec le matériau de votre choix. Suivez les instructions du fabricant pour tous les matériaux de restauration.

MODE: GRAVURE SÉLECTIVE

Le mordançage accidentel de la dentine n'aura pas d'impact négatif sur les forces d'adhésion.

1. Rincez abondamment la préparation et éliminez toute l'eau visible en séchant la surface pendant environ 5 secondes avec de l'air comprimé séché. Ne pas dessécher la surface de la dent.
2. Appliquez Clean & Boost® (Gel ou Liquide) sur les surfaces d'émail à coller. Agitez une dizaine de secondes, rincez abondamment et laissez humide.
3. Déposez une goutte de SUPERB Universal Adhesive dans la cavité du puits de mélange fermé.

- À l'aide d'un applicateur à brosse à poils, appliquez 1 couche d'adhésif universel SUPERB sur toute la préparation de la cavité et la structure dentaire environnante, laissez le matériau agir pendant vingt secondes. NE PAS SÉCHER.
4. À l'aide du matériau restant dans le puits de l'applicateur, appliquez 2 couches supplémentaires de SUPERB Universal Adhesive.
 5. Séchez soigneusement la surface. Ne soufflez pas la surface avec de l'air ou n'utilisez pas d'aspiration car cela pourrait enlever du matériau et entraîner des décollements, voire une sensibilité postopératoire.
 6. La lumière s'active pendant 10 secondes. L'adhésif universel SUPERB peut être activé avec n'importe quelle lumière d'activation dentaire.
 7. Continuez la procédure de restauration avec le matériau de votre choix. Suivez les instructions du fabricant pour tous les matériaux de restauration.

MODE: GRAVURE TOTALE

1. Rincez abondamment la préparation et éliminez toute l'eau visible en séchant la surface pendant environ 5 secondes avec de l'air comprimé séché. Ne pas dessécher la surface de la dent.
2. Appliquez Clean & Boost® (Gel ou Liquide) sur la surface dentaire à coller (dentine et émail). Agitez une dizaine de secondes, puis rincez abondamment et laissez humide.
3. Déposez une goutte de SUPERB Universal Adhesive dans la cavité du puits de mélange fermé. À l'aide d'un applicateur à brosse à poils, appliquez 1 couche d'adhésif universel SUPERB sur toute la préparation de la cavité et la structure dentaire environnante, laissez le matériau agir pendant vingt secondes. NE PAS SÉCHER.
4. À l'aide du matériau restant dans le puits de l'applicateur, appliquez 2 couches supplémentaires de SUPERB Universal Adhesive.

5. Séchez soigneusement la surface. Ne soufflez pas la surface avec de l'air ou n'utilisez pas d'aspiration car cela pourrait enlever du matériau et entraîner des décollements, voire une sensibilité postopératoire.
6. La lumière s'active pendant 10 secondes. L'adhésif universel SUPERB peut être activé avec n'importe quelle lumière d'activation dentaire.
7. Continuez la procédure de restauration avec le matériau de votre choix. Suivez les instructions du fabricant pour tous les matériaux de restauration.

Conservation:

Conserver à l'abri du soleil. Conserver entre 2°C/36°F et 30°C/86°F. Voir les étiquettes de chaque composant pour leur date d'expiration.

Attention:

Éviter le contact avec les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin. Les résines non polymérisées peuvent provoquer une sensibilisation cutanée chez les personnes sensibles, en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.

Remarques:

Allez sur vistaapex.com pour la FDS

¹ Bien que cela ne soit pas essentiel au succès de l'adhésif universel SUPERB, il est recommandé de nettoyer la préparation avec Clean and Boost® (Gel ou Liquide) avant de commencer le protocole de collage. On recommande aussi de poncer ou abraser doucement les particules de l'émail.

² Les dents de lait sont traitées de la même manière que celles permanentes

³ L'émail non coupé doit être rugueux ou mordancé avant le collage

⁴ L'adhésif universel SUPERB est toujours activé par la lumière avant de placer des facettes et des couronnes collées

DE**Beschreibung:**

SUPERB Universal Adhesive ist ein Ein-Flaschen-Bonding-System zur Verwendung bei ALLEN Zahnrestaurierungen. SUPERB Universal Adhesive kombiniert Ätzmittel, Primer und Bindeharz in einer einzigen Komponente. Durch den Wegfall von Komponenten und Arbeitsschritten innerhalb des Anwendungsprotokolls ist SUPERB Universal Adhesive extrem einfach zu aufzubringen und beinhaltet wenig bis keinen technischen Aufwand. Vorteile von SUPERB Universal Adhesive: einfache Anwendung, gleichmäßige Ergebnisse, bestes Bonding und die Vermeidung postoperativer Sensibilität in einer einzigen Flasche. SUPERB Universal Adhesive kann in 3 Anwendungsarten verwendet werden: Selbstätzten, selektives Ätzen oder vollständiges Ätzen. Alle 3 Techniken liefern außergewöhnliche Ergebnisse.

Anwendungsbereiche:

- Direkte Restaurierungen: zur Versiegelung von Schmelz / Dentin vor der Restaurierung mit lichthärtendem oder selbsthärtendem Kompositmaterial
- Indirekte Restaurierungen: Bonded lichtgehärtete, selbst- oder dualgehärtete Kompositzemente sowie Glasionomer- oder harzmodifizierte Glasionomerzemente
- Kleben von CEREC®-Restaurierungen
- Desensibilisierung: zur Behandlung überempfindlicher und / oder freiliegender Wurzeloberflächen
- Desensibilisierende Kronenpräparationen
- Versiegelungspräparationen vor dem Einsetzen von Amalgamen
- Kleben von Kronen und Brücken
- Kleben in Stiften und Hülsen
- Kleben von Veneers

Allgemeine Hinweise^{1,2,3,4:}**VERWENDUNGSArt: SELBSTHÄTZEN**

1. Spülen Sie das Präparat gründlich ab und entfernen Sie eventuell verbliebene Wasseransammlungen. Zahn feucht lassen.

2. Geben Sie einen Tropfen SUPERB Universal Adhesive in die Vertiefung des beiliegenden Mischgefäßes. Tragen Sie 1 Schicht SUPERB Universal Adhesive mit einem Borstenpinsel auf die gesamte Kavitätenpräparation und die umgebende Zahnstruktur auf und lassen Sie es 20 Sekunden einwirken. NICHT TROCKNEN.
3. Verwenden Sie das restliche Material in der Vertiefung des Mischgefäßes und denselben Applikator und tragen Sie 2 weitere Schichten SUPERB Universal Adhesive auf.
4. Die Oberfläche gründlich trocknen. Die Oberfläche nicht mit Luft oder Absaugung trocknen, da so Material von der Oberfläche entfernt werden könnte und das Bonding gelöst oder postoperativen Überempfindlichkeiten auftreten könnten.
5. 10 Sekunden lang lichthärteln. SUPERB Universal Adhesive kann mit jedem Lichtgerät für den Dentalbereich aktiviert werden.
6. Setzen Sie das restaurative Verfahren mit dem Material Ihrer Wahl fort. Befolgen Sie bei allen Restaurationsmaterialien die Anweisungen des Herstellers.

VERWENDUNGSArt:**SELEKTIVES ÄTZEN**

Ein versehentliches Ätzen von Dentin hat keinen negativen Einfluss auf die Haftfestigkeit.

1. Die Präparation gründlich abspülen und alles sichtbare Wasser durch Trocken der Oberfläche ca. 5 Sekunden lang mit getrockneter Druckluft entfernen. Dabei die Zahnoberfläche nicht austrocknen.
2. Tragen Sie Clean & Boost® (Gel oder Flüssigkeit) auf die zu verklebenden Emailleflächen auf. Zehn Sekunden lang bearbeiten, gründlich abspülen und feucht belassen.
3. Geben Sie einen Tropfen SUPERB Universal Adhesive in die Vertiefung des beiliegenden Mischgefäßes. Tragen Sie 1 Schicht SUPERB

- Universal Adhesive mit einem Borstenpinsel auf die gesamte Kavitätenpräparation und die umgebende Zahnstruktur auf und lassen Sie es 20 Sekunden einwirken.
NICHT TROCKNEN.
4. Verwenden Sie das restliche Material in der Vertiefung des Mischgefäßes und denselben Applikator und tragen Sie 2 weitere Schichten SUPERB Universal Adhesive auf.
 5. Die Oberfläche gründlich trocknen. Die Oberfläche nicht mit Luft oder Absaugung trocknen, da so Material von der Oberfläche entfernt werden könnte und das Bonding gelöst oder postoperativen Überempfindlichkeiten auftreten könnten.
 6. 10 Sekunden lang mit einem Lichtgerät aktivieren. SUPERB Universal Adhesive kann mit jedem Lichtgerät für den Dentalbereich aktiviert werden.
 7. Setzen Sie das restaurative Verfahren mit dem Material Ihrer Wahl fort. Befolgen Sie bei allen Restaurationsmaterialien die Anweisungen des Herstellers.

VERWENDUNGART:

VOLLSTÄNDIGES ÄTZEN

1. Die Präparation gründlich abspülen und alles sichtbare Wasser durch Trocken der Oberfläche ca. 5 Sekunden lang mit getrockneter Druckluft entfernen. Dabei die Zahnoberfläche nicht austrocknen.
2. Tragen Sie Clean & Boost® (Gel oder Flüssigkeit) auf die zu verklebende Zahnoberfläche auf (sowohl Dentin als auch Schmelz). Material zehn Sekunden lang bearbeiten, gründlich abspülen und feucht belassen.
3. Geben Sie einen Tropfen SUPERB Universal Adhesive in die Vertiefung des beiliegenden Mischgefäßes. Tragen Sie 1 Schicht SUPERB Universal Adhesive mit einem Borstenpinsel auf die gesamte Kavitätenpräparation und die umgebende Zahnstruktur auf und lassen Sie es 20 Sekunden einwirken.
NICHT TROCKNEN.

4. Verwenden Sie das restliche Material in der Vertiefung des Mischgefäßes und denselben Applikator und tragen Sie 2 weitere Schichten SUPERB Universal Adhesive auf.
5. Die Oberfläche gründlich trocknen. Die Oberfläche nicht mit Luft oder Absaugung trocknen, da so Material von der Oberfläche entfernt werden könnte und das Bonding gelöst oder postoperativen Überempfindlichkeiten auftreten könnten.
6. 10 Sekunden lang mit einem Lichtgerät aktivieren. SUPERB Universal Adhesive kann mit jedem Lichtgerät für den Dentalbereich aktiviert werden.
7. Setzen Sie das restaurative Verfahren mit dem Material Ihrer Wahl fort. Befolgen Sie bei allen Restaurationsmaterialien die Anweisungen des Herstellers.

Lagerung:

Vor Sonnenlicht schützen.
Zwischen 2°C und 30°C lagern.
Spezifische Verfallsdaten finden Sie auf den Etiketten der einzelnen Komponenten.

Warnhinweise:

Kontakt mit den Augen vermeiden.
Bei Kontakt des Materials mit den Augen mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Nicht polymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen, bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Hinweis:

SDB finden Sie unter vistaapex.com

¹ Obwohl es für den Erfolg von SUPERB Universal Adhesive nicht entscheidend ist, wird empfohlen, die Präparation vor Beginn des Bondingprotokolls mit Clean and Boost® (Gel oder Flüssigkeit) zu reinigen. Es wird auch empfohlen, den Zahnschmelz anzurauen oder kleine Partikel abzutragen.

² Milchzähne werden wie bleibende Zähne behandelt

³ Unbearbeiteter Zahnschmelz sollte vor dem Bonden aufgeraut oder geätzt werden

⁴ SUPERB Universal Adhesive wird vor dem Einsetzen von Veneers und gebondeten Kronen immer lichtgehärtet

IT**Descrizione:**

Il SUPERB Universal Adhesive è un sistema aderente legante in un singolo flacone per l'uso in TUTTI i restauri dentali. Esso combina mordenzante, primer e resina legante in un singolo componente. Grazie all'eliminazione di componenti e di fasi relative al protocollo di applicazione, SUPERB Universal Adhesive è estremamente facile da applicare ed è poco o per niente legato alla tecnica. SUPERB Universal Adhesive offre: applicazione semplice, risultati uniformi, il miglior legante oggi disponibile e l'eliminazione della sensibilità post-operatoria. Tutto in un unico flacone. L'adesivo universale SUPERB può essere usato in 3 modi: Automordenzante, mordenzante selettivo o mordenzante totale. Tutte e tre le tecniche danno risultati eccezionali.

Indicazioni per l'uso:

- Restauri diretti: per la sigillatura di smalto/dentina prima del restauro con materiale composito fotopolimerizzabile o autopolimerizzabile
- Restauri indiretti: per l'adesione di cementi composti, cementi in ionomero vetroso o vetroionomero modificato da resina fotopolimerizzati, autopolimerizzati o a doppia polimerizzazione.
- Per l'adesione di restauri CEREC®
- Desensibilizzazione: per trattare superfici radicolari ipersensibili e/o esposte.
- Desensibilizzazione delle preparazioni di corone
- Sigillatura delle preparazioni prima di collocare le amalgame.
- Bonding di corone e ponti
- Bonding di perni e monconi
- Bonding di veneer

Istruzioni generali^{1,2,3,4}:**MODALITÀ: AUTOMORDENZANTE**

1. Risciacquare bene la preparazione e rimuovere residui di acqua. Lasciare il dente inumidito.

2. Erogare una goccia di SUPERB Universal Adhesive nel pozzetto del miscelatore di accompagnamento. Usando un applicatore a spazzola, applicare 1 strato di adesivo universale SUPERB all'intera preparazione della cavità e alla struttura dentale circostante, quindi lasciare riposare il materiale per venti secondi. NON ASCIUGARE.
3. Usando il materiale restante nel pozzetto e lo stesso applicatore, applicare 2 ulteriori strati di SUPERB Universal Adhesive.
4. Asciugare accuratamente la superficie. Non usare getti d'aria né aspirare la superficie poiché ciò potrebbe rimuovere materiale dalla superficie e causare distacchi o sensibilità post operatoria.
5. Fotopolimerizzare per dieci secondi. L'adesivo universale SUPERB può essere attivato con qualsiasi lampada di attivazione dentale.
6. Continuare la procedura di restauro con il materiale di propria scelta. Seguire le istruzioni del produttore per tutti i materiali per restauro.

MODALITÀ:**MORDENZATURA SELETTIVA**

La mordenzatura accidentale di dentina non pregiudica la resistenza dell'adesione.

1. Sciacquare bene la preparazione e rimuovere tutta l'acqua visibile asciugando la superficie per circa 5 secondi con acqua compressa asciutta. Non essiccare la superficie del dente.
2. Applicare Clean & Boost® (Gel o Liquid) alle superfici di smalto da trattare. Agitare per dieci secondi, risciacquare accuratamente lasciando umido.
3. Erogare una goccia di SUPERB Universal Adhesive nel pozzetto del miscelatore di accompagnamento. Usando un applicatore a spazzola, applicare 1 strato di adesivo universale SUPERB all'intera

- preparazione della cavità e alla struttura dentale circostante, quindi lasciare riposare il materiale per venti secondi. **NON ASCIUGARE.**
4. Usando il materiale restante nel pozzetto e lo stesso applicatore, applicare 2 ulteriori strati di adesivo universale SUPERB.
 5. Asciugare accuratamente la superficie. Non usare getti d'aria né aspirare la superficie poiché ciò potrebbe rimuovere materiale dalla superficie e causare distacchi o sensibilità post operatoria.
 6. Fotopolimerizzare per dieci secondi. L'adesivo universale SUPERB può essere attivato con qualsiasi lampada di attivazione dentale.
 7. Continuare la procedura di restauro con il materiale di propria scelta. Seguire le istruzioni del produttore per tutti i materiali per restauro.

MODALITÀ: MORDENZATURA TOTALE

1. Sciacquare bene la preparazione e rimuovere tutta l'acqua visibile asciugando la superficie per circa 5 secondi con acqua compressa asciutta. Non essiccare la superficie del dente.
2. Appicare Clean & Boost® (Gel o Liquid) alla superficie del dente da trattare (sia dentina sia smalto). Agitare il materiale per 10 secondi, risciacquare accuratamente lasciando umido.
3. Erogare una goccia di SUPERB Universal Adhesive nel pozzetto del miscelatore di accompagnamento. Usando un applicatore a spazzola, applicare 1 strato di adesivo universale SUPERB all'intera preparazione della cavità e alla struttura dentale circostante, quindi lasciare riposare il materiale per venti secondi. **NON ASCIUGARE.**
4. Usando il materiale restante nel pozzetto e lo stesso applicatore, applicare 2 ulteriori strati di adesivo universale SUPERB.
5. Asciugare accuratamente la

superficie. Non usare getti d'aria né aspirare la superficie poiché ciò potrebbe rimuovere materiale dalla superficie e causare distacchi o sensibilità post operatoria.

6. Fotopolimerizzare per dieci secondi. L'adesivo universale SUPERB può essere attivato con qualsiasi lampada di attivazione dentale.
7. Continuare la procedura di restauro con il materiale di propria scelta. Seguire le istruzioni del produttore per tutti i materiali per restauro.

Conservazione:

Proteggere dai raggi solari. Conservare tra i 2°C/36°F e i 30°C/86°F. Vedere sulle etichette dei singoli componenti le relative date di scadenza.

Norme precauzionali:

Evitare il contatto con gli occhi. Se il materiale entra a contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua e contattare un medico. Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione epidermica. In persone soggette. In caso di contatto con la cute, lavare con cura con acqua e sapone.

Note:

Per gli SDS visitare vistaapex.com

¹ Anche se non è essenziale per la resa dell'adesivo universale SUPERB, si raccomanda di pulire la preparazione con Clean and Boost® (Gel o Liquid) prima di iniziare il protocollo di bonding. Si consiglia anche una pomiciatura o una delicata abrasione dello smalto.

² I denti decidui vengono trattati allo stesso modo di quelli permanenti

³ Prima di essere sottoposto a bonding, lo smalto non fresato deve essere irruvidito o mordenzato.

⁴ L'adesivo universale SUPERB viene sempre fotopolimerizzato prima di collocare veneer e corone trattate

ES**Descripción:**

El adhesivo universal SUPERB es un sistema de adhesión de una botella para usar en TODAS las restauraciones odontológicas. El adhesivo universal SUPERB combina resina decapante, imprimador y adhesiva en un único componente. Como elimina los componentes y pasos del protocolo de aplicación, el adhesivo universal SUPERB es extremadamente sencillo de aplicar y no tiene, o tiene muy poca, sensibilidad a la técnica. El adhesivo universal SUPERB proporciona, en una única botella, aplicación sencilla, resultados coherentes, la mejor adhesión en su tipo y la eliminación de la sensibilidad posoperatoria. El adhesivo universal SUPERB puede utilizarse en 3 modos: autodecapado, decapado selectivo y decapado total. Las 3 técnicas proporcionarán resultados excepcionales.

Indicaciones de uso:

- Restauraciones directas: para sellar esmalte / dentina antes de realizar la restauración con material compuesto autocurado o curado con luz.
- Restauraciones indirectas: adhesión de cementos compuestos, cementos de ionómero de vidrio o ionómero de vidrio modificado con resina autocurados, curados con luz o con doble curado.
- Restauraciones con CEREC® adhesivo
- Desensibilización: para tratar superficies de raíz hipersensibles y/o expuestas
- Desensibilización de preparaciones de corona
- Sellado de preparaciones antes de colocar la amalgama
- Adhesión de coronas y puentes
- Adhesión de postes y muñones
- Adhesión de carillas

Instrucciones generales ^{1, 2, 3, 4:}**MODO: AUTODECAPADO**

1. Enjuague completamente la preparación y elimine las acumulaciones de agua. Deje el diente húmedo.

2. Dispense una gota del adhesivo universal SUPERB en la cavidad del pozo de mezcla incluido. Con un aplicador de pincel de cerda, aplique 1 capa del adhesivo universal SUPERB en toda la preparación de la cavidad y la estructura circundante del diente; deje reposar durante 20 segundos. NO SECAR.
3. Con el material restante en el pozo y el mismo aplicador, aplique 2 capas adicionales de adhesivo universal SUPERB.
4. Seque completamente la superficie. No sople la superficie con aire ni use succión ya que podría quitar el material de la superficie y ocasionar que el adhesivo se despegue o sensibilidad posoperatoria.
5. Active con luz durante diez segundos. El adhesivo universal SUPERB puede activarse con cualquier luz de activación odontológica.
6. Continúe el procedimiento de restauración con el material que prefiera. En el caso de todos los materiales de restauración, acate las instrucciones del fabricante.

MODO: DECAPADO SELECTIVO

El decapado accidental de la dentina no influirá negativamente en la potencia de adhesión.

1. Enjuague completamente la preparación y seque la superficie durante aproximadamente 5 segundos con aire comprimido seco para eliminar todo el agua visible. No deseque la superficie del diente.
2. Aplique Clean & Boost® (Gel o Líquido) a las superficies del esmalte a adherir. Agite durante diez segundos, enjuague profusamente y deje húmedo.
3. Dispense una gota del adhesivo universal SUPERB en la cavidad del pozo de mezcla incluido. Con un aplicador de pincel de cerda, aplique 1 capa del adhesivo universal SUPERB en toda la preparación de la cavidad y la estructura circundante del diente; deje reposar durante 20 segundos. NO SECAR.

4. Con el material restante en el pozo y el mismo aplicador, aplique 2 capas adicionales de adhesivo universal SUPERB.
5. Seque completamente la superficie. No sople la superficie con aire ni use succión ya que podría quitar el material de la superficie y ocasionar que el adhesivo se despegue o sensibilidad posoperatoria.
6. Active con luz durante diez segundos. El adhesivo universal SUPERB puede activarse con cualquier luz de activación odontológica.
7. Continúe el procedimiento de restauración con el material que prefiera. En el caso de todos los materiales de restauración, acate las instrucciones del fabricante.

MODO: DECAPADO COMPLETO

1. Enjuague completamente la preparación y seque la superficie durante aproximadamente 5 segundos con aire comprimido seco para eliminar todo el agua visible. No deseque la superficie del diente.
2. Aplique Clean & Boost® (Gel o Líquido) a la superficie del diente a adherir (dentina y esmalte). Agite el material durante diez segundos, enjuague profusamente y deje húmedo.
3. Dispense una gota del adhesivo universal SUPERB en la cavidad del pozo de mezcla incluido. Con un aplicador de pincel de cerda, aplique 1 capa del adhesivo universal SUPERB en toda la preparación de la cavidad y la estructura circundante del diente; deje reposar durante 20 segundos. NO SECAR.
4. Con el material restante en el pozo y el mismo aplicador, aplique 2 capas adicionales de adhesivo universal SUPERB.
5. Seque completamente la superficie. No sople la superficie con aire ni use succión ya que podría quitar el material de la superficie y ocasionar que el adhesivo se despegue o sensibilidad posoperatoria.

6. Active con luz durante diez segundos. El adhesivo universal SUPERB puede activarse con cualquier luz de activación odontológica.
7. Continúe el procedimiento de restauración con el material que prefiera. En el caso de todos los materiales de restauración, acate las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento:

Proteja de la luz del sol.
Almacene entre 2°C/36°F y 30°C/86°F.
Consulte las etiquetas de los componentes individuales en búsqueda de las fechas de caducidad específicas.

Precaución:

Evite el contacto con los ojos. Si el material entra en contacto con los ojos, enjuague profusamente con agua y consulte al médico. La resina polimerizada puede ocasionar sensibilización de la piel en personas susceptibles; en caso de contacto con la piel, lave profusamente con agua y jabón.

Notas:

Visite vistaapex.com si desea conocer la hoja de seguridad.

¹Aunque no es esencial para el éxito del adhesivo universal SUPERB, se recomienda limpiar la preparación con Clean and Boost® (Gel o Líquido) antes de comenzar el protocolo de adhesión. También se recomienda realizar la abrasión del esmalte con polvo de piedra pómez o partículas finas.

²Los dientes temporales se tratan de la misma manera que los permanentes.

³El esmalte no cortado debe rasparse o decaparse antes de la adhesión.

⁴El adhesivo universal SUPERB siempre se activa con luz antes de colocar carillas o coronas adheridas.